



扫一扫验真伪



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11805

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

报告编号

CY2507529S-2

样品名称

重组胶原蛋白

检测项目

急性全身毒性试验

委托单位名称

美尔健（深圳）生物科技有限公司

委托单位地址

深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道
140 号生命科学产业园 A23 栋 201

发布日期

2025 年 09 月 25 日



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 1 页，共 8 页

说 明

1. 委托方或供样方如果对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个自然日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
2. 除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
3. 如样品为委托方或供样方送检时，委托方或供样方对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告无授权签字人、审核人员、编制人员签字无效。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

检 测 地 址：山东省青岛市城阳区岙东南路 21 号

邮 政 编 码：266000

售后服务电话：400-806-5995

网 址：www.sitande.com

邮 箱：standard@sitande.com





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 2 页，共 8 页

样品信息

样品名称	重组胶原蛋白	样品编号	C250723-032004
型号规格	10mL/瓶	包装规格	/
生产批号	/	生产日期	2025.07.19
有效期	/	样品数量	9 瓶
灭菌方式	非灭菌		
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
样品描述	完好		
储存条件	冷藏（2-8℃）		
预期用途/应用	/		
备注	以上试验样品信息（除样品编号外），均由样品委托单位提供，其真实性 and 准确性由委托单位负责。		

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告


KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 3 页，共 8 页

样品照片

样品接收日期：2025 年 07 月 29 日

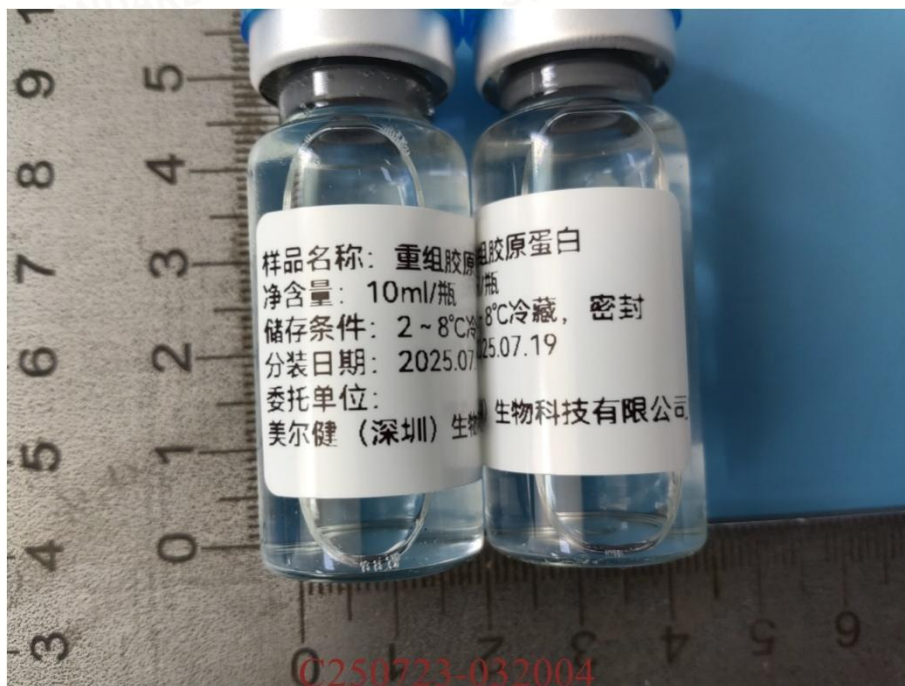

本页以下空白



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 4 页，共 8 页

试验确认、试验结果综述与签名

本次检测项目在本实验室资质认定范围内，CMA 证书号为 210015344456；本次试验过程严格恪守《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

本次检测项目在本实验室认可范围内，CNAS 证书号 CNAS L11805；本次试验过程严格恪守 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》规定。

检测项目	急性全身毒性试验
检测依据	GB/T 16886.11-2021 医疗器械生物学评价 第11部分：全身毒性试验 GB/T 16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
检测结果	试验观察期内未见试验样品导致动物死亡或全身毒性的任何症状，试验组和对照组动物体重无明显异常。
评价标准	在急性全身毒性试验观察期间，如接触试验样品的动物生物学反应不大于介质对照组动物，则试验样品符合试验要求。
结论	供试品无潜在急性全身毒性。
备注	/
报告完成日期	2025 年 09 月 25 日

编制人员：朱莹

审核人员：李琦

授权签字人：莫玉超

批准日期：2025/09/25





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 5 页，共 8 页

1 概述

本试验按照 GB/T 16886.11-2021《医疗器械生物学评价 第 11 部分：全身毒性试验》中推荐的全身毒性试验的要求，用 KM 小鼠来评价试验样品在本试验条件下导致潜在急性全身毒性反应的可能性。试验日期为 2025 年 08 月 01 日~2025 年 08 月 09 日。

将试验样品通过腹腔注射给予 5 只 KM 小鼠，另选择 5 只 KM 小鼠作对照，同法给予 0.9%氯化钠注射液，接触剂量为 50mL/kg。每日观察动物的反应，连续观察 3 天并称量动物体重。

在本试验条件下，未观察到该试验样品导致动物死亡或全身毒性的任何迹象，试验组和对照组动物体重无明显异常。试验样品无潜在急性全身毒性。

2 对照样品确认

名称：0.9%氯化钠注射液

制造商：四川科伦药业股份有限公司

规格：250mL /瓶

批号：C2250415E1

生产日期：2025.04.21

对照品状态：液体

保存条件：常温

3 试验系统鉴别

种属/品系：小鼠/KM 小鼠

数量：10 只，试验组、对照组各 5 只。

性别：雄性

重量：17~23g

健康状况：健康

饲养：5 只/盒

动物鉴别：伊红染色、耳号标识

适应期：5 天





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 6 页，共 8 页

4 饲养和护理

动物来源：山东朋悦实验动物科技有限公司

实验动物生产许可证号：SCXK（鲁）2022 0006

动物质量合格证号：370726251101181572

饲料：大小鼠饲料，山东朋悦实验动物科技有限公司

饲料合格证号：3708262500057125

垫料：实验用玉米芯垫料（6 目），江苏省协同医药生物工程有限责任公司

垫料合格证号：20-SM250724027

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

水：纯水

温度：20℃~25℃

相对湿度：30%~70%

光照：12h 明 12h 暗

人员：相关人员均已经过培训，考核合格，持证上岗

饲料、水中无干扰试验数据污染物。

5 试验系统合理性

KM 小鼠用于评价生物材料或浸提液已有很长的历史。国际标准和国家标准均建议采用 KM 小鼠进行全身毒性试验用于评价试验材料本身或浸提液。

6 接触途径确认

按照 GB/T 16886.11-2021《医疗器械生物学评价 第 11 部分：全身毒性试验》标准要求，试验样品原液采用腹腔注射给予试验动物。

7 试验设计

7.1 样品制备

取试验样品直接用于测试，无需制备。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 7 页，共 8 页

7.2 仪器设备信息

表 1 仪器设备信息

仪器设备名称	仪器设备编号
电子天平	KC-AP-YQ-461

7.3 试验步骤

7.3.1 动物的准备：试验前，将 10 只 KM 小鼠进行耳号标识，伊红染色标识，并称重检疫后，随机分为 2 组，分别为试验组和对照组，每组 5 只。使其在本实验室屏障环境动物房中预饲养 5 天，以适应实验室环境。

7.3.2 试验过程：接触试验样品原液前，先对 KM 小鼠进行称重，试验组动物通过腹腔注射给予试验样品，对照组同法给予氯化钠注射液；接触体积根据 GB/T 16886.11-2021 附录 B 中，表 B.1 试验样品接触最大单剂量体积中的要求为 50mL/kg，接触完成后，将 KM 小鼠返回各自的鼠盒中饲养。

7.3.3 症状观察：接触试验样品受试液后，对每只 KM 小鼠进行仔细全面的观察，每天观察、称重并记录，连续观察、称重 3 天，统计接触试验样品受试液后小鼠的体重，观察试验样品对体重的影响。若实验过程中出现临床指征时，需进行大体病理学评价。

7.4 评价规定

(1) 在急性全身毒性试验观察期间，如接触试验样品的动物生物学反应不大于介质对照组动物，则试验样品符合试验要求。

(2) 采用 5 只动物，如 2 只或 2 只以上出现死亡、或 2 只或 2 只以上出现抽搐或俯卧、或 3 只或 3 只以上出现体重下降超过 10%，则试验样品不符合试验要求。

(3) 如试验组动物仅显示轻微生物学反应，而且不多于 1 只动物出现一般生物学反应症状或死亡，应采用 10 只动物为试验组重复进行试验。

(4) 重复试验时，如全部 10 只接触试验样品的动物在观察阶段显示没有大于介质对照组动物的科学意义上的生物学反应，则试验样品符合试验要求。

7.5 结果

未观察到该试验样品导致动物死亡或全身毒性的任何症状，试验组和对照组动物体重无明显异常。详见表 2 和表 3。



斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 8 页，共 8 页

表 2 动物死亡和体重数据

接触 体积	组别	动物数 (只)	体重 ($\bar{X} \pm S$, g)					死亡 动物数 (只)	死亡 率 (%)
			D0	D1	D2	D3	D3 增重		
50 mL/kg	试验 组	5	19.60±2.07	21.20±2.17	22.60±1.95	23.80±1.79	4.20±0.84	0	0
	对照 组	5	20.80±1.30	22.40±1.67	24.20±1.92	25.80±1.92	5.00±0.71	0	

表 3 动物死亡、临床观察和体重下降结果

观察 时间	死亡数		出现临床症状动物数		体重下降>10%的动物数	
	试验组	对照组	试验组	对照组	试验组	对照组
0h	0/5	0/5	0/5	0/5	/	/
24h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
48h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
72h	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5

7.6 结论

在本试验条件下，试验样品未引起急性全身毒性反应，该样品无潜在急性全身毒性。

8 记录存储

与检测有关的所有原始数据和一份最终报告将作为本公司的存档文件归档保存。

9 试验偏离声明

本次试验严格按照检测依据执行，未发生影响试验数据有效性的偏离。

以上系申请人自送样品的检测结果，其结果仅对来样负责。

报告结束

