



扫一扫验真伪



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11805

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

报告编号

CY2507529S-3

样品名称

重组胶原蛋白

检测项目

皮内反应试验

委托单位名称

美尔健（深圳）生物科技有限公司

委托单位地址

深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道
140 号生命科学产业园 A23 栋 201

发布日期

2025 年 09 月 25 日



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱:standard@sitande.com
咨询服务:400-966-3888

网址:www.sitande.com
售后投诉:400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 1 页，共 9 页

说 明

1. 委托方或供样方如果对本报告有异议，请于收到报告之日起 5 个自然日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。
2. 除非另有说明，本报告仅对所检样品负责。
3. 如样品为委托方或供样方送检时，委托方或供样方对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责，本公司不承担任何相关责任。
4. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
5. 本报告无授权签字人、审核人员、编制人员签字无效。
6. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告；部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改，均属无效，且本公司将追究上述行为的法律责任。

检 测 地 址：山东省青岛市城阳区岈东南路 21 号

邮 政 编 码：266000

售后服务电话：400-806-5995

网 址：www.sitande.com

邮 箱：standard@sitande.com





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 2 页，共 9 页

样品信息

样品名称	重组胶原蛋白	样品编号	C250723-032004
型号规格	10mL/瓶	包装规格	/
生产批号	/	生产日期	2025.07.19
有效期	/	样品数量	9 瓶
灭菌方式	非灭菌		
生产单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
生产单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
样品描述	完好		
储存条件	冷藏（2-8℃）		
预期用途/应用	/		
备注	以上试验样品信息（除样品编号外），均由样品委托单位提供，其真实性 and 准确性由委托单位负责。		

本页以下空白





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告


KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 3 页，共 9 页

样品照片

样品接收日期：2025 年 07 月 29 日

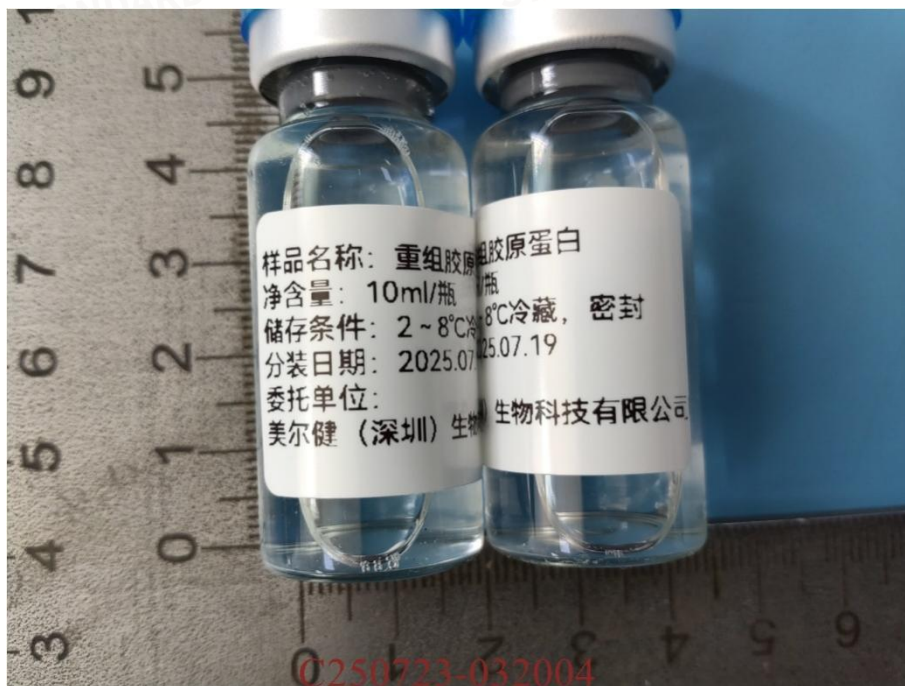

本页以下空白



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告



扫一扫验真伪

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 4 页，共 9 页

试验确认、试验结果综述与签名

本次检测项目在本实验室资质认定范围内，CMA 证书号为 210015344456；本次试验过程严格恪守《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。

本次检测项目在本实验室认可范围内，CNAS 证书号 CNAS L11805；本次试验过程严格恪守 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》规定。

检测项目	皮内反应试验
检测依据	GB/T 16886.23-2023 医疗器械生物学评价 第23部分：刺激试验 GB/T 16886.12-2023 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
检测结果	试验样品皮内反应最终记分为0.33。
评价标准	试验样品最终记分不大于1.0，符合试验要求。
结论	供试品皮内刺激反应符合试验要求。
备注	/
报告完成日期	2025 年 09 月 25 日

编制人员：朱莹

审核人员：李琦

授权签字人：莫玉超

批准日期：2025/09/25





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 5 页，共 9 页

1 概述

本试验按照 GB/T 16886.23-2023《医疗器械生物学评价 第 23 部分：刺激试验》的方法要求，试验样品通过皮内注射途径给予新西兰兔，对材料在试验条件下产生的刺激反应的潜能做出评定。试验日期为 2025 年 08 月 01 日~2025 年 08 月 08 日。

在本试验条件下，试验样品皮内反应最终记分为 0.33。试验样品皮内反应最终记分不大于 1.0，符合试验要求。

2 对照样品确认

2.1 阴性对照

名称：0.9%氯化钠注射液

制造商：四川科伦药业股份有限公司

规格：250mL/瓶

批号：C2250415E1

生产日期：2025.04.21

对照品状态：液体

保存条件：常温

3 试验系统鉴别

种属/品系：兔/新西兰兔

数量：3 只

性别：雄性

重量：2.0-2.5kg

健康状况：健康、初成年

饲养：单笼饲养

适应期：4 天

4 饲养和护理

动物来源：山东艾莱克生物科技有限公司

实验动物生产许可证号：SCXK（鲁）2024 0008

动物质量合格证号：370839251100078284



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱：standard@sitande.com
咨询服务：400-966-3888

网址：www.sitande.com
售后投诉：400-806-5995



扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

第 6 页，共 9 页

样品受理编号：C250723-032004

饲料：兔饲料，济南西岭角养殖繁育中心

饲料合格证号：3708242500056935

实验动物使用许可证号：SYXK（鲁）2023 0038

水：自来水（符合 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准）

温度：18℃~25℃

相对湿度：30%~70%

光照：12h 明 12h 暗

人员：相关人员均已经过培训，考核合格，持证上岗

饲料、水中无干扰试验数据污染物。

5 试验系统合理性

兔用于评价生物材料已有很长的历史。国际标准和国家标准均建议采用兔对试验材料在试验条件下产生刺激反应的潜在性做出评价。

6 接触途径确认

按照 GB/T 16886.23-2023《医疗器械生物学评价 第 23 部分：刺激试验》标准要求，试验样品采用皮内注射途径给予新西兰兔。

7 试验设计

7.1 样品制备

取试验样品直接用于测试，无需制备。

7.2 仪器设备信息

表 1 仪器设备信息

仪器设备名称	仪器设备编号
电子天平	KC-AP-YQ-365
实验动物室息柜	KC-AP-YQ-397

7.3 试验步骤

7.3.1 动物的准备：将 3 只新西兰兔进行标识，并称重检疫，使其在本实验室普通环境动物房中预饲养 4 天，以适应实验室环境。

7.3.2 动物备毛：试验前 18h 在新西兰兔背部脊柱两侧除去足够面积被毛（约 10 cm ×





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

第 7 页，共 9 页

样品受理编号：C250723-032004
20 cm），作为试验和观察部位。

7.3.3 接触过程：在新西兰兔脊柱左上侧注射 5 个点，每点注射 0.2mL 试验样品，在新西兰兔脊柱右上侧注射 5 个点，每点注射 0.2mL 0.9%氯化钠注射液作为对照，按下图所示。

说明：

- (1) —头端；
- (2) —0.2mL 受试物注射点；
- (3) —0.2mL 0.9%氯化钠注射液注射点；
- (4) —尾端。

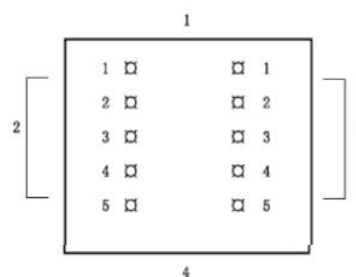


图 1 注射点排列

7.3.4 症状观察：注射后即刻并在 (24 ± 2) h、 (48 ± 2) h 和 (72 ± 2) h，观察记录各注射部位状况，按附表 2.给出的记分系统对每一观察期各注射部位的红斑和水肿的组织反应评分，并记录试验结果。

表 2 皮内反应记分系统

反 应	计分
红斑和结痂形成	
无红斑	0
极轻微红斑（勉强可见）	1
清晰红斑	2
中度红斑	3
重度红斑（紫红色）至无法进行红斑分级的结痂形成	4
水肿形成	
无水肿	0
极轻微水肿（勉强可见）	1
清晰水肿（肿起边缘清晰）	2
中度水肿（肿起约 1mm）	3
重度水肿（肿起超过 1mm，并超出接触区）	4
刺激最高计分	8
应记录并报告皮肤部位的其他情况	





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 8 页，共 9 页

7.4 结果评价

在 (72 ± 2) h 评分后，分别将每只动物试验样品侧或空白对照侧的 (24 ± 2) h、 (48 ± 2) h 和 (72 ± 2) h 的全部红斑与水肿记分相加，再除以 $15[3(\text{记分时间点}) \times 5(\text{试验样品或空白对照注射点})]$ ，计算出每只动物试验样品侧或空白对照侧的记分。3 只动物记分相加后除以 3 得出每一试验样品和相应空白对照的总平均记分。试验样品记分减去空白对照记分可得出试验样品最终记分。试验样品最终记分不大于 1.0，符合该试验要求。在任何观察期，如试验样品平均反应疑似大于空白对照反应，应另取 3 只家兔复试，如试验样品最终记分不大于 1.0，则符合试验要求。注：空白对照样品为图 1 中提到的极性或非极性溶剂对照。

7.5 结果

在本试验条件下，试验样品皮内反应最终记分为 0.33。计分情况见表 3。

表 3 皮内反应试验结果记录表

组别	动物 编号	症状	观察时间点				积分计算		
			0h	24h	48h	72h	平均 记分	总平均 记分	最终记分
样品侧	5175	红斑	0	5	5	5	1.00	0.33	0.33
		水肿	0	0	0	0			
	5176	红斑	0	0	0	0	0.00		
		水肿	0	0	0	0			
	5177	红斑	0	0	0	0	0.00		
		水肿	0	0	0	0			
对照侧	5175	红斑	0	0	0	0	0.00	0.00	
		水肿	0	0	0	0			
	5176	红斑	0	0	0	0	0.00		
		水肿	0	0	0	0			
	5177	红斑	0	0	0	0	0.00		
		水肿	0	0	0	0			

7.6 结论

在本试验条件下，试验样品皮内反应最终记分不大于 1.0，符合试验要求。





扫一扫验真伪

斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司

检验检测报告

KC-JL-GY-JS-331-2022 E/4

样品受理编号：C250723-032004

第 9 页，共 9 页

8 记录存储

与检测有关的所有原始数据和一份最终报告将作为本公司的存档文件归档保存。

9 试验偏离声明

本次试验严格按照检测依据执行，未发生影响试验数据有效性的偏离。

以上系申请人自送样品的检测结果，其结果仅对来样负责。

报告结束



斯坦德集团
STANDARD GROUP



邮箱: standard@sitande.com
咨询服务: 400-966-3888

网址: www.sitande.com
售后投诉: 400-806-5995