

检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

样品名称: 透皮纤连蛋白

送检单位: 美尔健（深圳）生物科技有限公司

样品来源: 客户送样

上海微谱检测科技集团股份有限公司



检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

页码: 1/5

样品名称	透皮纤连蛋白		
样品编号	2211007023-1		
样品数量	1	样品规格	/
颜色和物态	/	批号/型号	/
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司		
送检单位地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
抽样日期	/	样品接收日期	2022-11-30
检测周期	2022-11-30 ~ 2023-01-04		
检测项目	透皮吸收定性实验（1 个时间点：24 h）		
检测依据及结果	参考《GB/T 27818——2011 化学品皮肤吸收体外试验方法》。 结果见下页。		
备 注	/		

编 制: 张倩

审 核: 刘姿展

批 准: 刘姿展

签发日期: 2023.01.13

检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

页码: 2/5

1 测试目的

本测试基于乳猪皮-Franz cell 扩散池体系,以乳猪背部皮肤对不同样品进行 Franz 扩散池渗透性实验,考察经 FITC (异硫氰酸荧光素酯) 标记的样品对离体的小猪背部皮肤的透皮能力。通过后续测定透皮扩散后猪皮中 FITC 的分布情况描述透皮纤维蛋白体外透皮行为。

2 材料及样品

2.1 测试模型与测试体系

本测试选取乳猪皮作为测试模型,选取乳猪皮-Franz cell 扩散池体系为测试体系。

2.2 主要试剂

生理盐水。

2.3 主要设备

TK-12D 透皮吸收扩散仪 (上海锺凯)、Franz cell 扩散池 (上海锺凯)、KQ5200B 型超声波清洗仪 (昆山超声仪器)。

2.4 参考方法

参考 GB/T 27818-2011 化学品皮肤吸收体外试验方法标准。

3 测试装置

TK-12D 型透皮扩散试验仪结构包括恒温水浴箱、控制箱、操作台、透皮扩散池、补液管和连接管。透皮扩散池的内瓶上部设有补液口控制箱,经电线分别与恒温水浴箱、操作台实现电路联接,恒温水浴箱经连接管与透皮扩散池的外瓶相连通,补液瓶经连接管与透皮扩散池的补液口相连通,透皮扩散池放置在操作台上。本装置可以同时开展多个透皮实验,且互不干扰,无气泡现象,其接收室体积为 8.0 mL,扩散面积为 3.14 cm²。Franz cell 扩散池由上下两只筒状玻璃管对合而成,夹于其间的贴片将上下分为两室。上室为扩散室,下室为接收室,在接收室右部连一取样管,供进样、取样及排气泡用。参见图 1。

检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

页码: 3/5

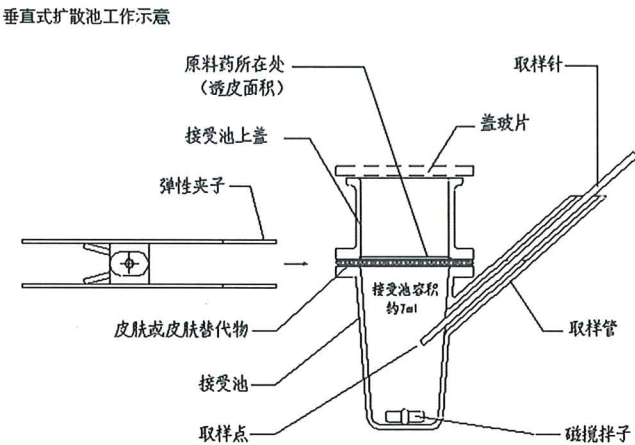


图 1 乳猪皮-Franz cell 扩散池工作示意图

4 测试分组

表 2 测试分组

样品名称	取样时间点	检测方法
透皮纤连蛋白	24 h	荧光成像 (FITC 标记)

5 透皮吸收测定步骤

- 向接收室中加入接收液: 用移液枪吸取 7.0 mL 接收液 (生理盐水) 注入接收室, 并将配套的磁力搅拌子放置于接收室内。
- 测试模型的组装与固定: 将乳猪皮固定于 Franz cell 扩散池的扩散室和接收室之间, 乳猪皮角质层朝向扩散室, 真皮层朝向接收室。固定好乳猪皮后, 根据取样管的液体高度, 在取样管中用移液枪补加 1.0 mL 接收液 (生理盐水), 使乳猪皮真皮层与接收液紧密接触, 接收液总体积为 8.0 mL。
- 将 Franz cell 扩散池固定于透皮吸收扩散仪中, 开启电磁搅拌器以 300 rpm 的速度搅拌, 保持 (32 ± 1) °C 恒温水浴, 并确保水浴夹层无气泡。

检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

页码: 4/5

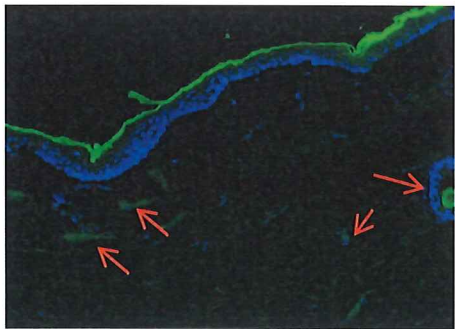
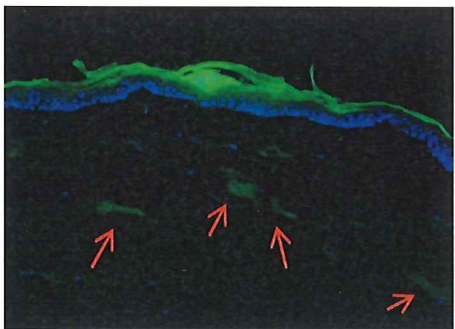
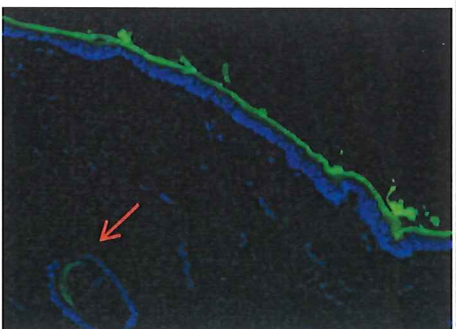
(4) 上样: 待扩散仪水浴温度恒定后进行上样处理, 用移液枪吸取 400 μL 样品添加至乳猪皮表面。

(5) 接收池样本采集: 于 24 h 收取各组猪皮置于 -80°C 冰箱中, 后续进行冰冻切片, DAPI 复染后利用荧光显微镜进行拍照。

6 测试结果

定性结果如表 3 所示:

表 3 测试结果汇总

分组	平行 1	平行 2	平行 3
24 h			

注: 蓝色为细胞核 DAPI 荧光, 绿色为经 FITC 标记样品的荧光。

结果说明:

透皮吸收 24 h 的 FITC 标记的样品有一定量渗透至真皮层。

7 结论

在本实验条件下, 样品透皮纤连蛋白经透皮吸收测试, 24 h 时 FITC 标记的样品有一定量渗透至真皮层。

8 参考文献

[1]GB/T 27818——2011 化学品皮肤吸收体外试验方法。

报告结束

检测报告

报告编号: SHA01-22111115-JC-01R1

页码: 5/5

—— 声明 ——

1. 报告若未加盖“检验检测专用章或报告专用章”或编制人、审核人、批准人未全部签字, 一律无效。
2. 本报告不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。
3. 报告部分提供或部分复制均视为无效。全复制件未重新加盖“检验检测专用章或报告专用章”视为无效。
4. 如对报告有疑问, 请在收到报告后 15 个工作日内提出。
5. 本报告结果仅对本次受测样品负责。未加盖 CMA 标志的报告中全部/部分检测项目未取得资质认定, 仅供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品功效研究等目的使用。
6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。
7. 未经本公司同意, 委托人不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传。
8. 本报告的符合性判定未考虑测量不确定度对结果的影响。
9. 本报告代替 SHA01-22111115-JC-01, 原报告作废。